

GlucoContro.online

Maak vanop afstand verbinding met de gegevens van uw patiënten*



Nodig uw patiënten uit om hun
bloedglucoseresultaten te delen en help
hen zo bij hun diabetesmanagement.

<https://glucocontro.online>

*Patiënten moeten geregistreerd zijn op GlucoContro.online en dienen
toestemming te geven om hun gegevens met hun medisch zorgverlener te delen

Makkelijke toegang tot patiënteninformatie

Beschikbaar op één scherm met één enkele klik




*Ambulant glucoseprofiel

Een nieuwe manier om bloedglucoseresultaten te bekijken

Geeft inzicht in glucosewaarden dankzij:

Snelkeuzemenu

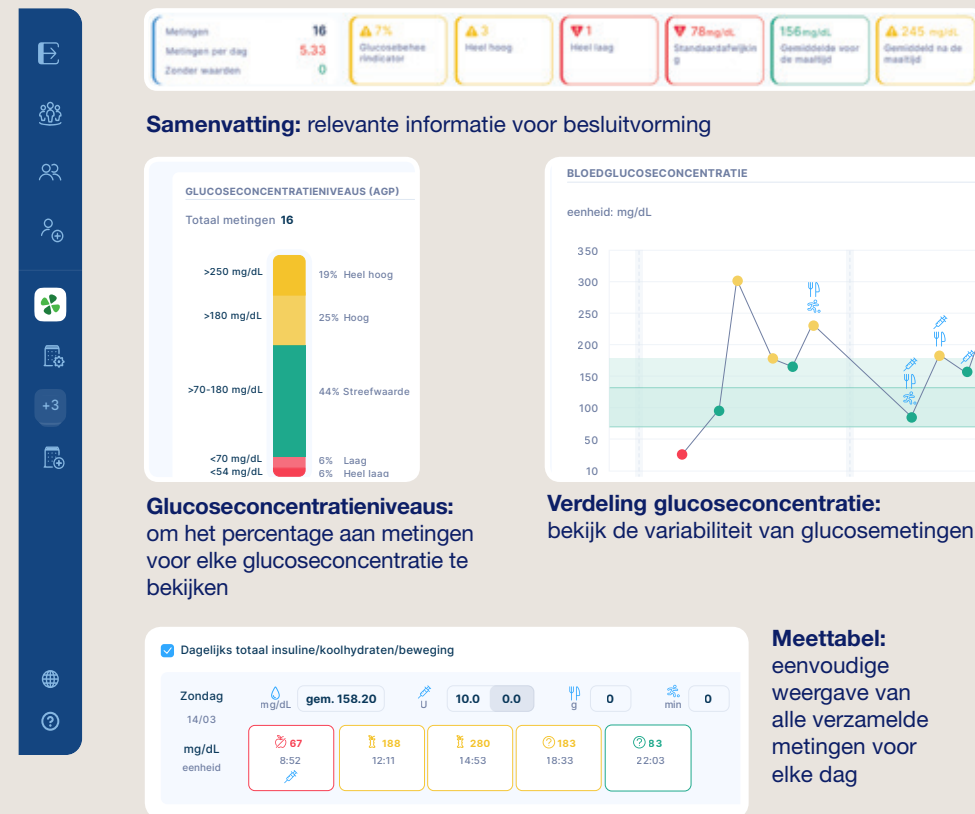

Samenvatting resultaten:

voor een meer gedetailleerde samenvatting van de bloedglucose van de patiënt (BG)

	Totaal	Gemiddelde	Mediaan	Std.afwijking	Hoogste	Laagste	Hoog	Streefwaarde	Laag
Alle	16	171 mg/dL	178 mg/dL	78 mg/dL	303 mg/dL	41 mg/dL	43.75%	43.75%	12.5%
Nuchter	3	68 mg/dL	67 mg/dL	28 mg/dL	97 mg/dL	41 mg/dL	0%	33.33%	66.67%
Voor de maaltijd	3	156 mg/dL	176 mg/dL	43 mg/dL	186 mg/dL	107 mg/dL	33.33%	66.67%	0%
Na de maaltijd	5	245 mg/dL	270 mg/dL	62 mg/dL	303 mg/dL	169 mg/dL	80%	20%	0%
Geen markering	5	167 mg/dL	179 mg/dL	53 mg/dL	229 mg/dL	83 mg/dL	40%	60%	0%

Eenvoudige onboarding en uitnodiging voor patiënten

Registreer in 3 simpele stappen

1. Ga naar **GlucoContro.online** en klik op registreren
2. Vul de informatie in
3. Wacht op de goedkeuring van de ziekenhuisbeheerder*

Account aanmaken

Accounttype



Kies dit type account als bij u diabetes is vastgesteld.



Kies dit type account als u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent.



Kies dit type account als u voor iemand met diabetes wilt zorgen, maar u bent geen diabetespatiënt.

E-mailadres

Vul e-mailadres in

Voornaam

Vul voornaam in

Achternaam

Vul achternaam in

Klik op “Nieuwe patiënt toevoegen”



Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig

QR code

Voornaam

Vul voornaam in

Achternaam

Vul achternaam in

☐ Ik wil een e-mailuitnodiging sturen naar deze patiënt

Land

België

Optionele informatie

Nieuwe patiënt toevoegen

Nieuwe patiënt toevoegen

Handmatig

QR code



De geeft aan dat uw patiënt de uitnodiging heeft aanvaard



Enzo Peeters

36 Leeftijd Type 1



0800 97 212

info@ascensiadiabetescare.be

<https://www.ascensiadiabetescare.be>

*Dit kan tot 24 uur duren

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo en Contour zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple en het Apple-logo zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een service van Apple Inc. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Er mag geen relatie of goedkeuring worden afgeleid of geïmpliceerd.

LMR-ADC-BE-2022005-L-NL