

Contour next link^{2.4}

Draadloze
bloedglucosemeter


Gebruikt uitsluitend CONTOUR®NEXT-
bloedglucosesteststrips




ASCENSIA
Diabetes Care

Medtronic

KORTE HANDLEIDING

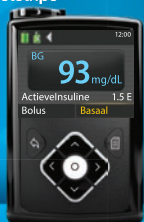

Meter

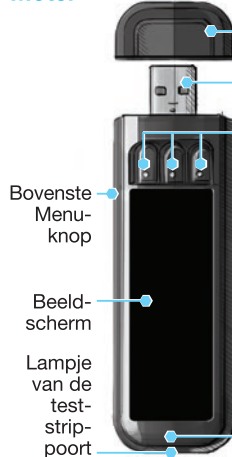

Pomp



OPMERKING: Controleer de meeteenheden van uw meter. Voor volledige instructies kunt u de handleiding van uw meter raadplegen.

90004143 Rev. 07/19

Begininstelling van uw meter en verbinding met de MiniMed® 640G-insulinepomp

De meter opladen

- 1 Verwijder de USB-dop om de USB-connector te zien.



Uw CONTOUR®NEXT LINK 2.4 meter heeft een oplaadbare batterij.

Laad uw meter op met de stopcontactlader* of door de USB-connector op een computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de computer aan staat.

Uw meter zal kort "Niet testen-Batterij laadt op" tonen en het lampje van de teststrippoort zal fllikkeren. **U kunt geen bloedglucosetest uitvoeren terwijl de batterij wordt opgeladen.**

Wanneer het opladen klaar is zal het lampje van de teststrippoort uitgaan. Ontkoppel uw CONTOUR NEXT LINK 2.4-meter om te testen.

Koppel de meter los van de oplaadbron alvorens te beginnen met de instelling

- 2 Om met het instellen te beginnen, houdt u de Menuknop op de bovenkant een paar seconden ingedrukt tot de meter wordt ingeschakeld.



- 3 Scrol naar beneden om uw taal te selecteren. Druk op **OK**.



Op dit schermvoorbeeld ziet u de taalkeuzemogelijkheden. De taalvolgorde kan anders zijn, afhankelijk van uw land.


- 4 Druk op **OK** als de juiste taal wordt getoond. Druk op **NEE** als de verkeerde taal wordt weergegeven.

Aansluiten op de pomp

- 5 Verbinding maken met een MiniMed Pomp? Druk op **OK**.




- 6 Druk op **OK**.

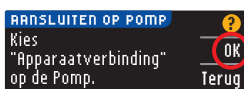

- 7 Leg de meter neer en pak uw pomp op.

Druk op een van de knoppen om het scherm in te schakelen en druk vervolgens op de menuknop. Gebruik de pijl omlaag om naar **Extra's** te scrollen. Druk op de knop Kies.

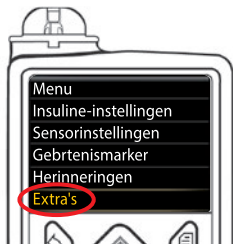


Als het scherm van de pomp uit gaat, drukt u op een van de knoppen om het weer in te schakelen.

- 8 Scrol in het hulpprogrammamenu met de pijl omlaag naar **Apparaattopties**. Druk op de knop Kies.




- 9 Scrol in het menu Apparaattopties naar **Apparaatverbinding**. Druk op de knop Kies.

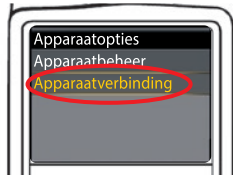

- 10 Plaats de meter en de pomp naast elkaar. Selecteer **Automatisch verbinden** op uw pomp.

Selecteer **Automatisch verbinden** op uw meter.

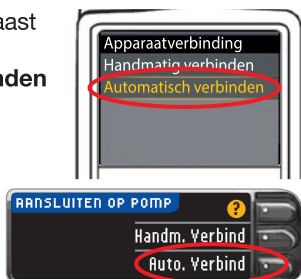

- 11 Lees het scherm van de pomp en gebruik de pijl omlaag om naar de volgende pagina te scrollen.

Gebruik de pijlknoppen om naar **Doorgaan** te scrollen.

Druk op de knop Kies.




- 12 Plaats de meter en de pomp naast elkaar. Selecteer **Zoeken** op de pomp.


Selecteer **zoek** op de meter.



Het zoeken kan tot 2 minuten duren.

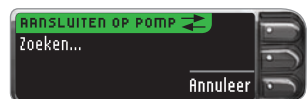

- 13 Controleer of het Apparaat SN (serienummer) op de **pomp** overeenkomt met het serienummer op de **meter**. Als ze met elkaar overeenkomen scrolt u naar **Bevestigen** op de pomp. Druk op de knop Kies.

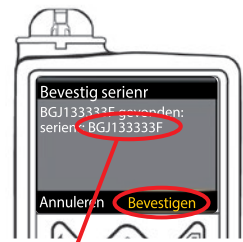


Als de pomp verbinding maakt met de meter, verandert het serienummer op het scherm van de **meter** in een ander serienummer. Dit nummer is het serienummer van de **pomp**.

- 14 Keer de pomp om. Controleer of het serienummer op de achterkant van de **pomp** overeenkomt met het pompserienummer dat nu wordt weergegeven op het scherm van de **meter**. Druk op **Volgende**.



- 15 Selecteer **Altijd** en druk op **OK** op het volgende scherm.

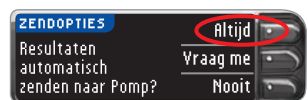


- 16 Selecteer de **Datum Notatie**.



- 17 Druk op **OK**. *Opmerking: Als de tijd en datum niet juist zijn, moet u deze op de pomp wijzigen.*



- 18 Druk op **Accepteren** om **AutoLog Uit.** te selecteren. *Met AutoLog kunt u een testresultaat markeren als Nuchter, Voor Eten of Na Eten. Raadpleeg uw handleiding om meer te weten te komen.*

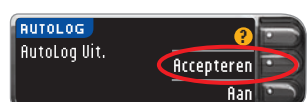

*Niet alle metersets bevatten een stopcontactlader. Neem contact op met de Klantenservice voor informatie over het verkrijgen van een stopcontactlader.

- 19** **Accepteren of Wijzig Signalen** Hoge en Lage Grens.
De meter waarschuwt u met een geluid wanneer uw bloedglucoseniveau hoger of lager dan de ingestelde niveaus is.



- 20** **Accepteren of Wijzig** uw doelwaardenbereik.
Het doelwaardenbereik is uw doel voor uw bloedglucosetestresultaten.



OPMERKING: De alarmsignalen kunnen alleen buiten uw gekozen doelwaardenbereik(en) worden ingesteld. De doelwaarden kunnen alleen binnen uw gekozen waarschuwingsniveau(s) worden ingesteld. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Zie onderaan de contactgegevens van de Klantenservice.

- 21** Uw systeem is nu ingesteld en klaar om een bloedglucosetest uit te voeren.
Ga hieronder naar stap 1.

✓ Instellingen is klaar. Voer strip in om test uit te voeren.

Materialen voor het testen



CONTOUR®NEXT-teststrip



Prikapparaat



Lancet



CONTOUR®NEXT LINK 2.4 bloedglucosemeter



WAARSCHUWING:

- Het prikapparaat is bestemd voor zelftesten door één patiënt. Het mag vanwege het infectierisico niet door meer dan één persoon worden gebruikt.^{1,2}
- ⓧ Gebruik een nieuw lancet telkens wanneer u test, omdat het na gebruik niet meer steriel is.
- Alle onderdelen van de set worden beschouwd als biologisch gevaarlijk en kunnen mogelijk besmettelijke ziekten overdragen, zelfs nadat u ze gereinigt hebt.
- Was altijd uw handen goed met water en zeep en droog ze goed af vóór en na het testen en bij het gebruik van de meter, het prikapparaat of de teststrips.

Voor volledige instructies voor het reinigen van uw meter kunt u de handleiding van uw meter raadplegen.


Uw bloed testen

Een bloeddruppel verkrijgen

- 1** Steek de teststrip in de meter en wacht tot u het bericht **BLOED AANBRENGEN** ziet.



- 2** Verwijder de punctiedop van uw prikapparaat. Druk het lancet stevig in het prikapparaat tot het niet verder kan.

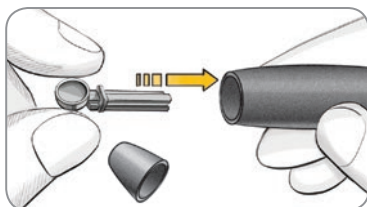

De afbeeldingen van het prikapparaat dienen uitsluitend ter illustratie. Uw prikapparaat ziet er mogelijk anders uit. Raadpleeg de bijsluiter van uw prikapparaat voor uitgebreide instructies voor het gebruik van het prikapparaat.

- 3** Plaats de punctiedop terug. Draai de draaiknop van de punctiedop om de diepte van de prik in te stellen.



- 4** Verkrijg uw bloeddruppel.



Een bloeddruppel testen

- 5** Houd het uiteinde van de teststrip in de bloeddruppel. Als de eerste bloeddruppel niet voldoende is, laat de meter twee pieptonen horen en het bericht **STRIP ONVOLDENDE GEVULD** verschijnt op het scherm. U hebt ongeveer 30 seconden om meer bloed aan te brengen op dezelfde teststrip.



OPMERKING: Als AutoLog AAN is, wordt u, voordat uw resultaat wordt weergegeven, gevraagd uw resultaat te markeren als Nuchter, Voor Eten of Na Eten. Als uw resultaat boven de instelling Hoge Grens of onder de instelling Lage Grens ligt, ziet u uw resultaat zonder een AutoLog-selectie te hoeven maken.

Referenties

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Resultaten naar uw MiniMed-pomp sturen

- 6** Als **Altijd** werd gekozen bij **Zendopties** tijdens de **Instelling**, worden de resultaten direct naar uw pomp gezonden. Als **Yraag me** werd gekozen bij **Zendopties** tijdens de **Instelling**, kunt u na elke bloedglucosetest kiezen om uw resultaat naar uw pomp te verzenden.

Druk op **Verzenden** of **Niet verzenden**.



VOORZICHTIG: Controleer altijd het beeldscherm op uw pomp om te garanderen dat het getoonde glucoseresultaat overeenkomt met het op de meter getoonde glucoseresultaat.

Bolus, Herinnering en Notities

- 7** Selecteer **Bolus** om een bolus naar uw pomp te sturen. Selecteer **Herinner** om een herinnering in te stellen voor uw volgende test. Selecteer **Notities** om meer informatie aan het resultaat toe te voegen.



Bevestig dat het resultaat naar de pomp is gestuurd

- 8** Pak uw pomp op. Druk op de knop **Vorige** en houd deze ingedrukt om naar het beginscherm te gaan. Uw bloedglucoseresultaat wordt op het scherm van de pomp weergegeven.



De meter uitzetten

- 9** Verwijder de teststrip en de meter zal binnen 3 minuten vanzelf worden uitgeschakeld. Of houd de menuknop ingedrukt om de meter uit te schakelen.



Zie uw CONTOUR NEXT LINK 2.4 handleiding, de bijsluiter van het prikapparaat en de handleiding van de MiniMed-insulinepomp voor volledige instructies.

De Klantenservice van Ascensia Diabetes Care is bereikbaar tijdens de kantooruren op: 0800 97 212 (België) 800 27 254 (Luxemburg)

E-mail: info@ascensiadiabetescare.be
www.ascensiadiabetescare.be
www.diabetes.ascensia.com

Zie www.patents.ascensia.com voor informatie over octrooien en hieraan gerelateerde licenties.

IVD Bestemd voor in-vitro diagnostisch gebruik

ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

CE
2797

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed en Paradigm zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.